

ケント牽引開創器カタログ

TKZ-F10328

[Kent Retractor Series Catalogue]



高砂医科工業株式会社

Takasago Medical Industry Co., Ltd.

Tokyo Japan

※セットは組み合わせの一例としてご提案するものです。構成部品は全て1個(1本)単位でご購入頂けます。
※※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

鉤と言えばケント鉤!


The Retractor, "Kent"

TKZ-F10328-OBS
KENT RETRACTOR BASIC SET

ケント牽引開創器 ベーシックセット

製造販売届番号:13B1X00245080001

ベーシックセットの設置例
View of Basic Set

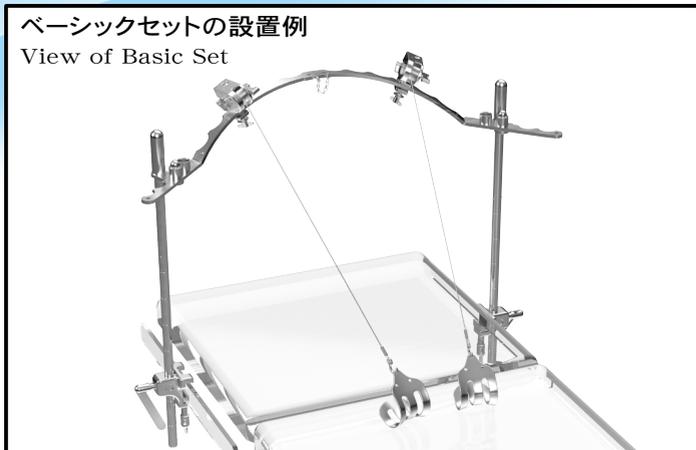


COMPONENTS: TKZ-F10328-OBS

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|--|------------|
| -A | アーチ型バー Arch Bar A | 1個 |
| -B | 支柱(横幅調整付) Support Bar B 600mm | 2本 |
| -CS | 牽引器CS型 Retractor CS | 2個 |
| -D① | フリッチ状弁 大 Saddle hook D1 w60mm × d65mm | 2個 |
| -D② | フラット状弁 大 Flat hook D2 w65mm × d60mm | 2個 |
| -D③ | フラット状弁 小 Flat hook D3 w60mm × d50mm | 2個 |
| -D④ | フリッチ状弁 小 Saddle hook D4 w55mm × d55mm | 2個 |
| -E | クランピング Clamp E | 2個 |

ベーシックセットの特徴 The features of Basic Set

- 滅菌をする器具が少ない。
Only few parts to be sterilized
- 上腹部手術の際に自在な方向からの牽引による良好な視野の展開が可能。
Wide operative field available by traction from full direction for Upper Abdomen Operation
- アーチ型バーを足側にセットすることにより下腹部、骨盤内手術にも使用可能。
Also available for Lower Abdomen Operation and Intrapelvic Operation by setting Arch Bar A at patient's foot side
- オプション器具(応用セット、ブーメランセット)による補助的な牽引が可能。
Optional set (Application Set, Boomerang Set, etc.) useful to support desired traction

ベーシックセット構成一式
Components of Basic Set

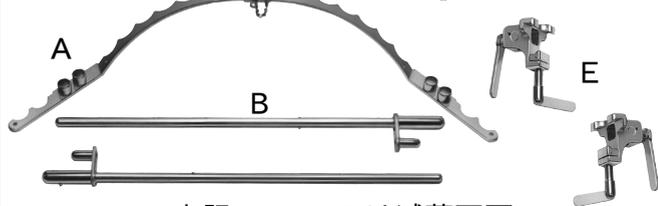


上記 A、B、E は滅菌不要
Parts A, B, E are useful in non-sterilized condition.



上記 CS、D は要滅菌
Parts CS, D series shall be sterilized for use.

B.支柱(横幅調整付)の特徴
The features of Support bar B

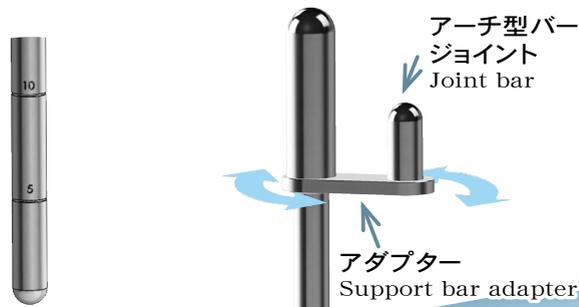

支柱下部には5cm刻みの目盛付(35cmまで)。アーチ型バー設置時の高さ調整が容易です。
Easy reading scales with 5cm interval scales up to 35cm height

アダプター部は支柱固定後も360°回転します。アーチ型バー取付け時の微調整が可能です。
360 degrees rotatable Support bar adapter is easily fixed on Arch bar A.



TKZ-F10328-HS
牽引器HS型
Retractor HS

TKZ-F10328-CS
牽引器CS型
Retractor CS

牽引器CS型/HS型の特徴

The features of Retractor CS and Retractor HS


- CS型はC型、HS型はH型の後継品です。
Retractor CS is the improved model of Retractor C. Retractor HS is the improved model of Retractor H.
- より耐腐食性の高い総ステンレス小型ボディ。
Compact body of anti-corrosive stainless steel
- 弊社従来品から置き換えてお使い頂けます。
Replaceable with the former models

TKZ-F10328-1

KENT RETRACTOR COMPLETE SET

ケント牽引開創器 コンプリートセット

製造販売届番号: 13B1X00245070025
13B1X00245080001

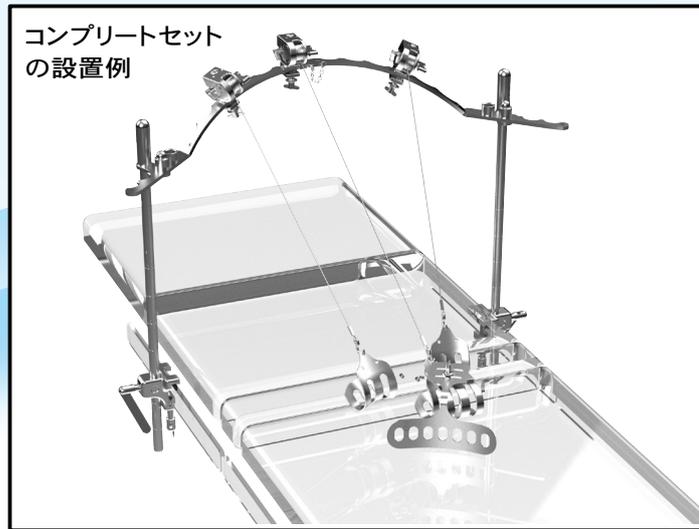


肝切除、胃全摘等、広範囲に使用出来ます。
Kent Retractors realize optimum condition for wide range of operations, hepatectomy, gastrectomy, etc.

COMPONENTS: TKZ-F10328-1

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|--|------------|
| -A | アーチ型バー Arch Bar A | 1個 |
| -B | 支柱(横幅調整付) Support Bar B 600mm | 2本 |
| -CS | 牽引器CS型 Retractor CS | 3個 |
| -D① | フリッチ状弁 大 Saddle hook D1 w60mm × d65mm | 2個 |
| -D② | フラット状弁 大 Flat hook D2 w65mm × d60mm | 2個 |
| -D③ | フラット状弁 小 Flat hook D3 w60mm × d50mm | 1個 |
| -D④ | フリッチ状弁 小 Saddle hook D4 w55mm × d55mm | 2個 |
| -E | クランピング Clamp E | 2個 |
| -WRD | ウイングレトラクター本体 Base hook WRD w60mm × d50mm | 1個 |
| -WR1 | WR用ブレード両翼7窓型 Flexible wide blade WR1 w170mm × d50mm | 1枚 |
| -WR2 | WR用ブレード片翼4窓型 Flexible single blade WR2 w100mm × d50mm | 1枚 |
| -WR3 | WR用ブレード両翼5窓型 Flexible wide blade WR3 w140mm × d50mm | 1枚 |
| -WR4 | WR用ブレード片翼3窓型 Flexible single blade WR4 w85mm × d50mm | 1枚 |

コンプリートセット構成一式
Components of Complete Set

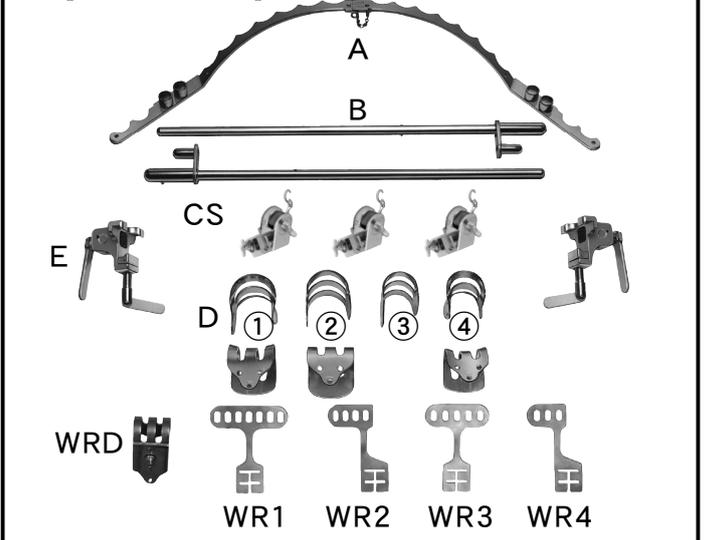


TKZ-F10328-2

KENT RETRACTOR APPLICATION SET

ケント牽引開創器 応用セット

製造販売届番号: 13B1X00245080001

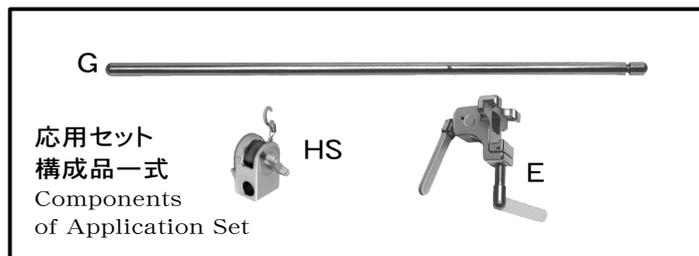


COMPONENTS: TKZ-F10328-2

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|--------------------------|------------|
| -G | 長尺支柱 Support bar G 600mm | 1本 |
| -HS | 牽引器HS型 Retractor HS | 1個 |
| -E | クランピング Clamp E | 1個 |

※こちらのセットには弁が含まれておりません。
Please order or prepare a proper hook for using Application Set.

応用セット+弁(オプション品)の設置例

View of Application Set + Hook
(option)

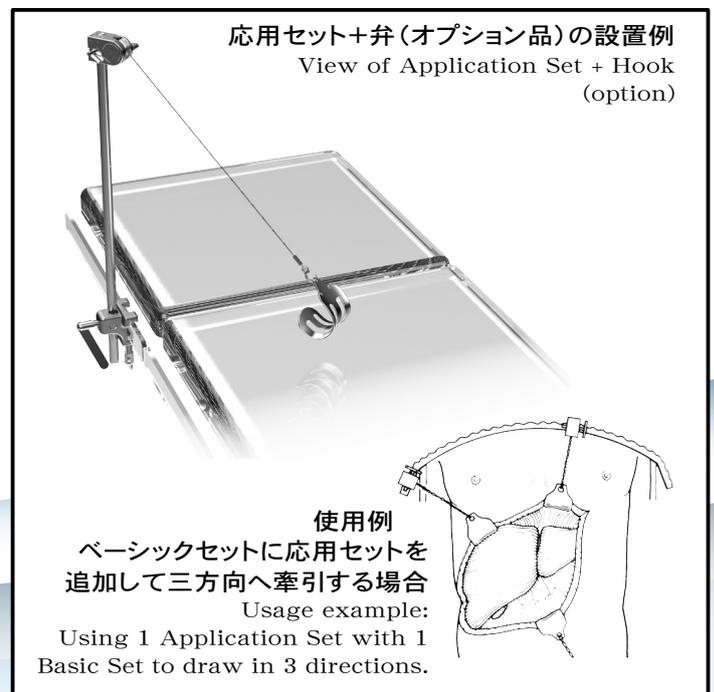

TKZ-F10328-WRS
KENT WING RETRACTOR SET

ケント ウィングレトラクター 標準セット
製造販売届番号:13B1X00245070025

ケント ウィングレトラクターの特徴
The features of Wing Retractor

- ・ 上腹部手術に適した設計。
Suitable structure for Upper Abdomen Operation
- ・ 幅広く肝臓を圧排。Widely suppressing liver
- ・ ブレードを本体から外さずに圧排位置を変更出来る水平二連溝固定法。
Double "T" Cut Sliding system allows to slide the suppressing position with only loosening a screw.
- ・ ブレードの自由な組み合わせが可能。
Free combination by detachable blades
- ・ 有窓ブレードは軽量で曲げる事が可能。
Light and flexible blades

WRDウィングレトラクター本体+WR1の組合せ例
An example of the combination for Base hook and Flexible wide blade WR1

COMPONENTS: TKZ-F10328-WRS


| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|---|------------|
| -WRD | ウィングレトラクター本体 Base hook WRD w60mm×d50mm | 1個 |
| -WR1 | WR用ブレード両翼7窓型 Flexible wide blade WR1 w170mm×d50mm | 1枚 |
| -WR2 | WR用ブレード片翼4窓型 Flexible single blade WR2 w100mm×d50mm | 1枚 |
| -WR3 | WR用ブレード両翼5窓型 Flexible wide blade WR3 w140mm×d50mm | 1枚 |
| -WR4 | WR用ブレード片翼3窓型 Flexible single blade WR4 w85mm×d50mm | 1枚 |

使用例 Examples of usage

TKZ-F10328-SDS/SDL
KENT SIDE ALMOND RETRACTOR SET

ケント サイドアーモンド鉤

製造販売届番号:13B1X00245150002

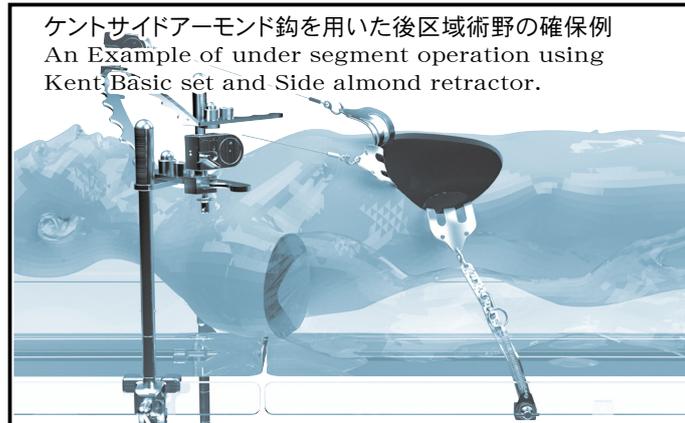

ケントサイドアーモンド鉤(小)セット構成一式
Components of Kent side almond retractor set (S)

COMPONENTS: TKZ-F10328-SDS

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|---|------------|
| -BS | 弁付バンド(小) w55mm×d55mm Kent side almond belt with D4 | 1個 |
| -SF | スプリングフック Kent side almond spring hook | 1個 |

ケントサイドアーモンド鉤(大)セット構成一式
Components of Kent side almond retractor set (L)


COMPONENTS: TKZ-F10328-SDL

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|---|------------|
| -BL | 弁付バンド(大) w60mm×d65mm Kent side almond belt with D1 | 1個 |
| -SF | スプリングフック Kent side almond spring hook | 1個 |

TKZ-F10328-8
KENT RETRACTOR BOOMERANG SET
ケント牽引開創器 ブーメランセット

製造販売届番号:13B1X00245080001

ブーメランセット+弁各2を用いた設置例
An example
Boomerang x2 + Retraction hook x2

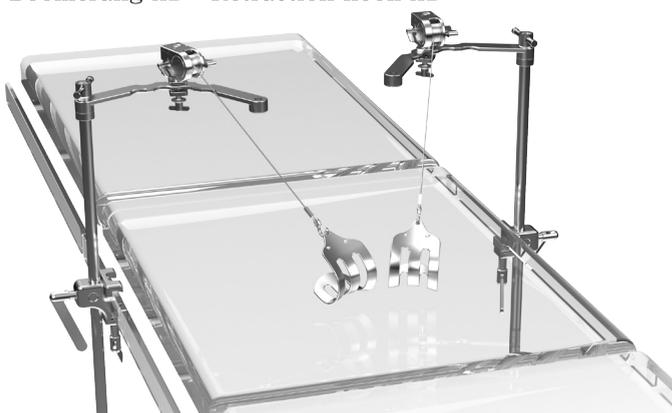


ブーメラン型バーにより横方向、脚部からの開創、開胸が容易に行えます。
Boomerang bar allows to easily perform retraction from bedside or foot side for thoracotomy incision.

COMPONENTS: TKZ-F10328-8

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 数量 Q'ty |
|------------|-------------------------------------|------------|
| -BOA | ブーメラン型バー 230mm Boomerang Bar BOA | 1個 |
| -BOB | ブーメラン用支柱 500mm ※ Support Bar BOB | 1本 |
| -CS | 牽引器CS型 Retractor CS | 1個 |
| -BOE | ブーメラン用クランピング ※ Clamp BOE | 1個 |


こちらのセットには弁が含まれておりません。
Please order or prepare a proper hook for using Boomerang Set.

使用例
ベーシックセット+ブーメラン
セット3台で、四方向へ牽引
Usage example
Basic set + Boomerang x3

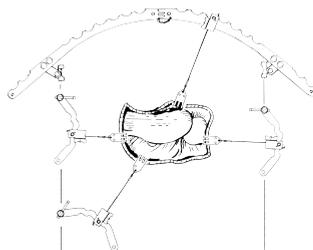

ブーメラン型バーは左右どちら向きにも設置出来ます。
Boomerang bar is reversible to change the direction.

ブーメランセット構成一式
Components of Boomerang Set

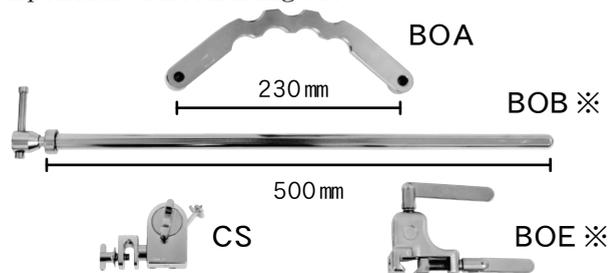

※ブーメラン用支柱(BOB)とブーメラン用クランピング(BOE)には回転防止の溝とピンが付いています。必ずセットでご使用ください。
To prevent from rotating. There are two longitudinal drains on BOB and a pin on BOE.
Please be sure to use BOB and BOE together.

ケント牽引開創器用 弁一覧

Optional Retractor Hooks

| TKZ-F10328 | 品名 Description | 幅 (w) × 深さ (d) |
|------------|---|----------------|
| -D① | フリッチ状弁 大 Saddle hook D1 | 60mm × 65mm |
| -D② | フラット状弁 大 Flat hook D2 | 65mm × 60mm |
| -D③ | フラット状弁 小 Flat hook D3 | 60mm × 50mm |
| -D④ | フリッチ状弁 小 Saddle hook D4 | 55mm × 55mm |
| -D⑤ | 小児用弁(フラット) 大 Flat hook D5 for infant | 29mm × 40mm |
| -D⑥ | 小児用弁(フラット) 小 Flat hook D6 for infant | 29mm × 29mm |
| -D⑦ | 新生児用弁(フリッチ) 大 Saddle hook D7 for neonate | 29mm × 26mm |
| -D⑧ | 新生児用弁(フリッチ) 小 Saddle hook D8 for neonate | 20mm × 22mm |
| -D⑨ | フラット状弁 極小 Flat hook D9, medium | 42mm × 42mm |
| -D⑩ | フリッチ状弁 極小 Saddle hook D10, medium | 42mm × 45mm |
| -D⑪ | フリッチ状弁 肥満用 Saddle hook D11 for obesity | 75mm × 75mm |
| -D⑫ | フラット状弁 肥満用 Flat hook D12 for obesity | 65mm × 75mm |

TKZ-F10328-D①
フリッチ状弁 大
Saddle hook D1



D⑥
小児用弁 小
Flat hook D6
for infant



D⑪
フリッチ状弁 肥満用
Saddle hook D11
for obesity



D③
フラット状弁 小
Flat hook D3



D⑦
新生児用弁 大
Saddle hook D7
for neonate



D⑫
フラット状弁 肥満用
Flat hook D12
for obesity



製造販売業者: 高砂医科工業株式会社
Manufacturer: Takasago Medical Industry Co., Ltd.
Tokyo Japan

お問い合わせは
本郷営業所まで

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
http://www.takasagoika.co.jp
E-mail:hongo@takasagoika.co.jp